

# RECEPTAL® *Twist*

## Safe. Solid. Sealed.

De RECEPTAL® Twist liner is een gepatenteerd alles-in-één-systeem voor het opvangen van afvalvloeistof en solidifier, beschikbaar in een formaat van 1,5 l en 2 l, met of zonder VAC-GARD®. Het intuïtieve Twist-ontwerp, dat is gemaakt vanuit het oogpunt van veiligheid en gemak, is zeer gebruiksvriendelijk; één snelle draai, en klaar!

- De **afgesloten fles die vooraf is gevuld met een afgemeten hoeveelheid solidifier** is ingebouwd in het linerdeksel zodat solidifier probleemloos kan worden toegediend en overtollige vloeistoffen worden ingesloten.
- De **geïntegreerde fles** maakt open poorten overbodig en creëert een gesloten systeem dat het contact met solidifierpoeder en besmette afvalvloeistoffen tot een minimum beperkt. Dit vergroot de veiligheid voor de zorgverlener.
- Het **alles-in-één-systeem met solidifier en liner** vermindert de kosten die extra hulpmiddelen voor afzonderlijke liners en solidifierhouders met zich meebrengen. Bovendien bespaart het schoonmaakwerkzaamheden en mogelijke verspilling als gevolg van een overmatige hoeveelheid solidifier.
- **Volledig lekvrij**, naadloze liners voor minimaal risico op besmetting.
- **Latexvrij, BPA-vrij** en **niet-steriel**.




## Maximale veiligheid en minimale kosten met een Twist!

Draai de dop rechtsom om solidifier toe te voegen



Na een ingreep draait u de dop van de geïntegreerde en vooraf gevulde solidifierfles 180° rechtsom om eenvoudig en veilig solidifier in de liner toe te voegen. De Twist maakt het openen van poorten overbodig en creëert een gesloten systeem dat veilig, sterk en afgedicht is voor afvalvloeistoffen die vervolgens eenvoudig kunnen worden verwijderd.

# Geef een twist aan de nieuwe RECEPTAL® Twist liners

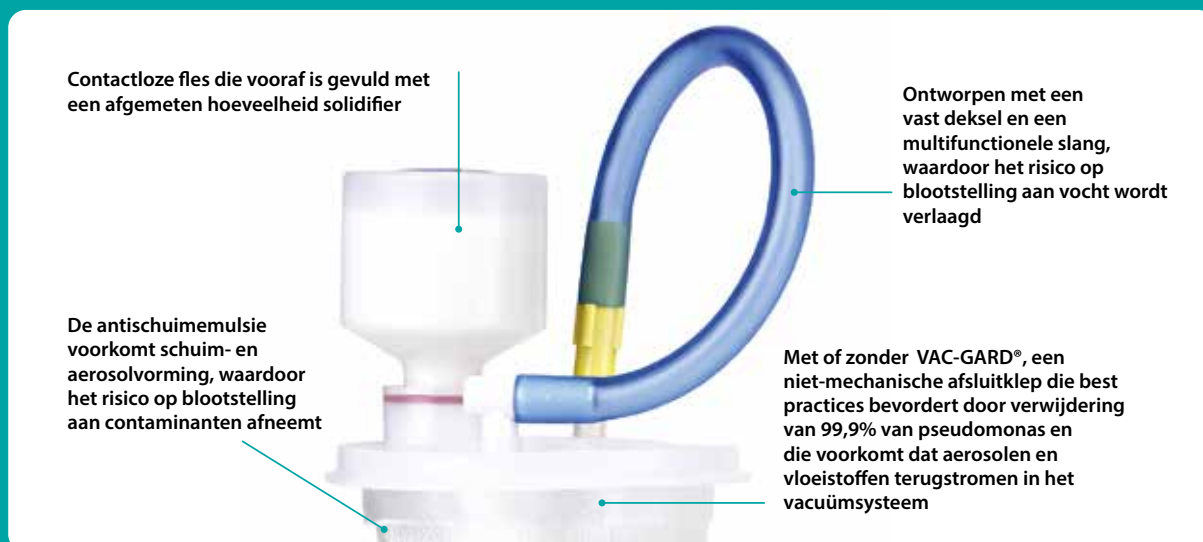

## Bestelinformatie

Artikel-code	Beschrijving	Aantal/verpakking
43115S	RECEPTAL® Twist liner van 1500 ml met VAC-GARD® en vooraf bevestigde solidifierfles	40/doos
43116S	RECEPTAL® Twist liner van 1500 ml met vooraf bevestigde solidifierfles	40/doos
43120S	RECEPTAL® Twist liner van 2000 ml met VAC-GARD® en vooraf bevestigde solidifierfles	40/doos
43121S	RECEPTAL® Twist-liner van 2000 ml met vooraf bevestigde solidifierfles	40/doos

## Compatibel met RECEPTAL® canisters en trolley

Artikel-code	Beschrijving	Aantal/verpakking
43423-01	RECEPTAL® canister van 1500 ml, herbruikbaar	10/doos
43445-01	RECEPTAL® canister van 2000 ml, herbruikbaar	10/doos
43476-P2	Afstelbare hoogte, aan/uit-vacuümpoort, meervoudige trolley met (4) canisterhouders van polycarbonaat	1/doos



Ga naar [www.amsino.com](http://www.amsino.com) voor de volledige productlijn van RECEPTAL®

**AMSINO**  
Advancing Healthcare Worldwide®

**HALYARD**

Amsino International, Inc. | Distributed by Halyard

708 Corporate Center Drive, Pomona, CA 91768 • 800.632.6746 • fax: 909.626.3888 • info@amsino.com

De beschreven producten zijn mogelijk niet in alle landen in licentie gegeven of beschikbaar voor verkoop. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een volledige lijst met indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Het symbool \* geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het Amerikaanse octrooibureau en in bepaalde andere landen. Receptal en Vac-Gard zijn geregistreerde handelsmerken van Amsino International, Inc. © Copyright 2018, Amsino International, Inc. Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van O&M Halyard of gelieerde bedrijven. ©2020. Alle rechten voorbehouden. HC571-00-NL

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Care Team van Halyard:

**NL (gratis)**  
Tel: 0800 020 17 33 - Fax: 0800 022 75 49  
customerservice.bn1@hyh.com

**BE (gratis)**  
Tel: 0800 890 13 - Fax: 0800 117 33  
customerservice.bn1@hyh.com

[www.halyardhealth.nl](http://www.halyardhealth.nl)